

Verso l'isola ideale



150°



Attraverso l'integrazione,
il potenziamento delle tue
capacità professionali



Promozione valida fino al 30 giugno 2011

S280 TRC CONTINENTAL

Entra nel mondo delle
promozioni Stern Weber
e costruisci il modello
che fa per te.





Configurazione

TAVOLETTA MEDICO montata su doppio braccio articolato e autobilanciato con bloccaggio pneumatico verticale.

Sistema di bloccaggio automatico della leva di richiamo strumenti dinamici

Supporto poggiastrumenti in silicone asportabile ed autoclavabile

Dispositivo automatico anti-retrazione dei liquidi ai manipoli

Cordoni strumenti rimovibili per la loro facile igienizzazione

Sistema di sicurezza per la selezione automatica degli strumenti

Regolazione indipendente degli spray, Chip Air e Chip Water

Pulsantiera multifunzioni a membrana con protezioni monouso

Regolazione rapida potenza/velocità degli strumenti

Navigazione dei menù, nuova interfaccia ed ampio display a colori

1. **MODULO MIDWEST** a 4 vie elettrificato per turbina con fibra ottica
2. **MODULO MM elettrico Brushless** con fibra ottica (100/40.000 rpm)
3. **MODULO SIRINGA** a 6 funzioni con guscio inox e beccuccio autoclavabile
4. **MODULO ABLATORE STERN WEBER SC-A2** chiave dinamometrica e 4 punte

GRUPPO IDRICO A TERRA per la migliore rigidità strutturale d'insieme.

Bacinella motorizzata in vetro, smontabile e disinfettabile con rotazione di 270°, fontanella e porta bicchiere estraibili e disinfettabili

Riscaldamento acqua al bicchiere

Predisposizione allacciamenti per sistema multimedia

Tavoletta assistente montata su doppio braccio articolato, regolabile in altezza, orientabile con 4 alloggiamenti: 2 per cannule aspirazione e 2 per strumenti opzionali

Pulsantiera multifunzioni a membrana con protezioni monouso

Sistema di aspirazione con selezione automatica delle cannule, dotato di 2 filtri e di 2 valvole

Lavaggio automatico delle cannule di aspirazione

Le foto sono indicative, ai fini della promozione vale la descrizione.



S280 TRC Continental

Isola di lavoro che si ispira al tuo talento

SANASPRAY sistema autonomo di alimentazione idrica e di disinfezione

TAVOLETTA PORTATRAY size 2 in acciaio inox estraibile e autoclavabile

LAMPADA OPERATORIA STERN VENUS PLUS con movimentazioni su 3 assi, schermo di protezione e maniglie estraibili e igienizzabili. Intensità luminosa regolabile da 8.000 a 35.000 Lux. Temperatura colore 4.900 K.

POLTRONA STERN 280 P TRC sospesa e solidale al gruppo idrico.

Movimentazione elettromeccanica della seduta e dello schienale, schienale/Trendelenburg sincrono

Memorizzazione di 12 posizioni di lavoro e 3 di servizio

Appoggiatesta ad articolazione orbitale Aitaxis 3

Sistemi di sicurezza antischiacciamento posti sullo schienale e sul carter inferiore della seduta.

BRACCIOLO sinistro ribaltabile per un'ottimale accesso lato assistente

STOP VACUUM Comando avvio/arresto del sistema di aspirazione sulla base di sicurezza della poltrona

PIASTRA DI INSTALLAZIONE INTEGRATA

Stern Credit - Leasing finanziari specifici

Esempio:

- Leasing 8 mesi a **150,00 €**
- **Zero spese istruttoria**
- **Valore riscatto finale 1%**
- **Canoni residui 56 mesi 429,00 €**
- **Assicurazione All Risk inclusa**

Soluzioni finanziarie e operative, presso la rete dei distributori Stern Weber

Tasso Leasing, ai fini della legge sulla trasparenza bancaria min. 7,04% - max 7,65%. Le condizioni finanziarie indicate hanno carattere indicativo e potranno subire variazioni in funzione dell'andamento del mercato finanziario anche prima della scadenza della campagna. Tutti gli importi indicati sono al netto di IVA. Fogli informativi a disposizione sul sito: www.easingsolutions.bnpparibas.it/trasparenza

Tutti i prezzi della promozione sono al netto di iva



Tutti i modelli S280 TRC sono vere e proprie isole di lavoro in grado di offrire l'integrazione di strumenti avanzati, sistemi multimediali e di radiologia digitale, offrendo all'odontoiatra un centro di trattamento compatto ed integrato.

ZEN-X Sensore radiografico a tavoletta medico


ZEN-X è il primo passo verso l'integrazione di sistemi radiografici digitali al riunito.

In opzione su S280 TRC, l'operatore trova il sensore estraibile comodamente collocato sulla tavoletta medico.

Il suo design, con bordi smussati e arrotondati, agevola il corretto posizionamento nella bocca del paziente dove risulta più confortevole.

L'innesto rinforzato del cavo e la sigillatura del rivestimento proteggono perfettamente il sensore e aumentano la solidità del dispositivo. Igienizzabile e facilmente smontabile, il sensore con il suo cavo può essere trasferito ed installato su altre macchine predisposte. Il supporto è smontabile ed autoclavabile.

Con ZEN-X a bordo macchina, amplifichi le tue capacità diagnostiche mediante immagini di qualità superiore, senza liquidi chimici di sviluppo, senza tempi di attesa.

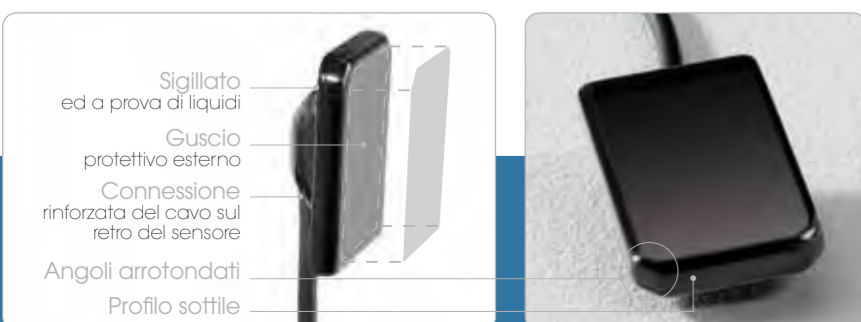

Con l'acquisto di S280 TRC vi offriamo:
Sensore ZEN-X integrato al riunito
aggiungendo 56 rate mensili da soli **22,00 €**



RXDC HyperSphere Plus

Direttamente integrato sul riunito, senza inconvenienti legati all'installazione, RXDC HyperSphere Plus rappresenta una soluzione funzionale per la diagnosi in diretta.

Dotata di tecnologia HyperSphere, la testata ruota liberamente attorno al rivoluzionario giunto sferico per raggiungere qualsiasi posizione, inclusa quella verticale.

Controllo wireless

Facile da usare, il dispositivo di comando digitale portatile offre una gamma completa di programmi di esposizione. RXDC definisce automaticamente la giusta esposizione selezionando la regione anatomica d'interesse.

L'integrazione completa di RXDC e ZEN-X rappresenta un potenziamento delle capacità diagnostiche ed è una soluzione che garantisce grande comodità ed efficienza.

Con l'acquisto di S280 TRC vi offriamo:
RXDC HyperSphere Plus integrato al riunito
aggiungendo 56 rate mensili da soli **44,00 €**



OPZIONE

Pompa peristaltica integrata

Con l'applicazione pompa peristaltica, il chirurgo può effettuare interventi di chirurgia orale e di implantologia con impiego del micromotore brushless i-XS4.

Tutte le prestazioni ideate per interventi di chirurgia orale, compresi la portata e il funzionamento della pompa, sono gestite dalla nuova elettronica interattiva e i dati sono presentati in modo molto chiaro sul nuovo display a colori della tavoletta medico.



Micromotore brushless i-XS4

Disponibile come opzione su S280TRc, i-XS4 può essere utilizzato per interventi classici di odontoiatria conservativa, protesica e di endodonzia nonché chirurgia in presenza dell'applicazione pompa peristaltica.

La regolazione e il controllo elettronico del torque fino a 4,5 Ncm e della velocità da 100 a 40.000 rpm, oltre alle funzioni di auto-forward e auto-reverse, permettono un'ampia flessibilità d'impiego.

Dimensioni: Ø22 x 47,5 mm

Peso: 82 g

Una rete di distribuzione e assistenza capillare ed efficiente al vostro servizio

Piemonte e Valle D'Aosta

Torino **Forb** S.p.A. Tel. 011/21790

Organizzazione Giordana

Novara **SL L'Arrocca** S. Tel. 338/4791101

Torino **Giordana A.** S.a.s. Tel. 011/6692163

Lombardia

Brescia **Dental G. Service** S.r.l. Tel. 030/348249

Certosa di Pavia PV **A.B. Dental** S.a.s. Tel. 335/5343701

Como **Blind** S.r.l. Tel. 031/590756

Curno BG **Nordental Divisione Impianti** S.r.l. Tel. 035/507446

Milano **Mazzola Odontoservice** S.r.l. Tel. 02/33603033

Milano **Revello** S.p.A. Tel. 02/27080877

Morbegno SO **Mazzola Odontoservice** S.r.l. Tel. 0342/612442

Trentino Alto Adige

Bolzano **Sanident** S.r.l. Tel. 0471/930244

Trento **Revello** S.p.A. Tel. 045/8238611

Veneto

Peraga di Vigonza PD **Revello** S.p.A. Tel. 049/8936823

Selvazzano Dentro PD **Dental Point** S.a.s. Tel. 049/637288

Verona **Revello** S.p.A. Tel. 045/8238611

Friuli Venezia Giulia - Belluno

Pordenone **Athena** S.r.l. Tel. 0434/513211

Liguria

Genova **Forb** S.p.A. Tel. 010/8356132

Genova **Revello** S.p.A. Tel. 010/3627048

Emilia Romagna

Bologna **Revello** S.p.A. Tel. 051/6312598

Migliarino FE **Farina A. Impianti** Tel. 0533/51144

Piacenza **Dental Service Piacenza** S.n.c. Tel. 0523/755070

Soliera MO **Gasparini** S.n.c. Tel. 059/566559

Villarotta di Luzzara RE **Cominato** Tel. 0522/228033

Toscana

Pistoia **Dentaform** S.r.l. Tel. 0573/368038

Pontedera PI **Dontotec Group** S.r.l. Tel. 0587/294271

Prato **Revello** S.p.A. Tel. 057/4514144

Siena **Med Elettrodentale** Tel. 339/6266479

Marche

Colleamarino AN **Revello** S.p.A. Tel. 071/887116

Umbria

Ponte S. Giovanni PG **Revello** S.p.A. Tel. 075/976609

Lazio

Roma **Carnevale** Tel. 06/21701978

Roma **Pellegrino** S.r.l. Tel. 06/21700303

Roma **Revello** S.p.A. Tel. 06/51601136

Roma **World Line** S.r.l. Tel. 06/30819677

Abruzzo e Molise

Città S. Angelo PE **Revello** S.p.A. Tel. 085/950444

Campania

Napoli **D.L.B.** S.r.l. Tel. 081/5463206

Salerno **Barca Medical** S.r.l. Tel. 089/253600

Puglia e Basilicata

Triggiano BA **Revello** S.p.A. Tel. 080/4551267

Calabria

Santa Maria di Catanzaro CZ **Revello** S.p.A. Tel. 0961/62011

Reggio Calabria **Effegiesse** S.r.l. Tel. 0965/332638

Sicilia

Dental Carry Group

Catania **Dental Carry** S.a.s. Tel. 095/7226471

Messina **Dental Carry** S.a.s. Tel. 090/51090

Palermo **Assidental** S.a.s. Tel. 091/6371386

Carlentini SR **Oins Group** S.r.l. Tel. 095/7835853

Sardegna

Cagliari **Candido Cacace** S.a.s. Tel. 070/565618

Sassari **Revello** S.p.A. Tel. 348/7264489



Stabilimento:

Via Bicocca, 14/C - 40026 Imola (BO) - Tel. +39 0542 653441 - Fax +39 0542 653601
www.sternweber.com - sternweber@sternweber.com